


transcodent™ Aghi di alta qualità


Prodotti di ingegneria tedesca per il comfort e la sicurezza

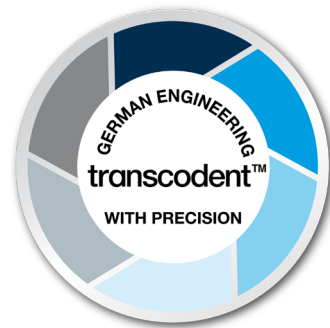

- Aghi per iniezione Painless Steel™
- Aghi per iniezione Luminject™
- Aghi per iniezione Luer Lock
- Intraligamentalia™
- Aghi per aspirazione
- Aghi per aspirazione endodontica
- Aghi per irrigazione endodontica
- Aghi per irrigazione
- Aghi erogatori per paste

Tubofiale

- Attacco in plastica, per l'uso con siringhe per tubofiale
- Attacco Luer Lock per siringa monouso
- G 30 per anestesia intraligamentare
- Cannula siliconata
- Attacco con flettatura di precisione per una connessione sicura e semplicità d'impiego
- Sterilizzati in ossido di etilene

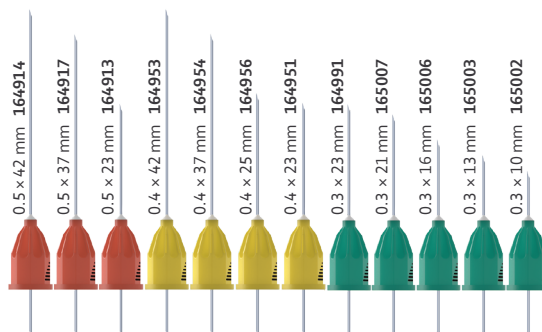

Aghi per anestesia dentale Painless Steel™

Tubofiale

Misure: G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
Colori: rosso, giallo, verde
Confezione: 100 Pezzi




Flusso maggiore
Diametro interno aumentato

Tubofiale

- Per anestesia intraligamentare e per infiltrazione. Regione dell'arcata superiore, dell'arcata inferiore e dei denti anteriori
- Maggiore flusso grazie al diametro interno aumentato
- Parete sottile

Luer Lock


- Attacco Luer Lock per siringa monouso

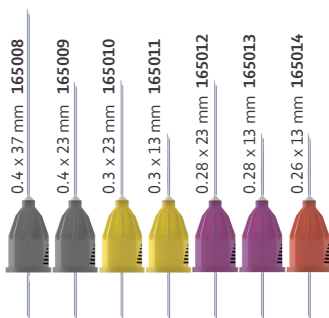

Aghi per anestesia dentale Luminject™

Tubofiale Parete sottile

Misure: G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm, 0.28 mm, 0.26 mm
Colori: grigio, giallo, viola, rosso
Confezione: 100 Pezzi

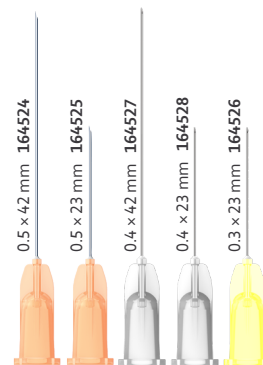

Aghi per iniezione

Luer / Luer Lock


Misure: G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
Colori: rosso, grigio, giallo
Confezione: 100 Pezzi

- Siringa per tubofiale, per anestesia intraligamentare e intrasettale
- Acciaio inossidabile di alta qualità, autoclavabile e sterilizzabile
- Consente l'uso in più quadranti durante un trattamento
- Dosaggio pratico e preciso: ≈0,06 mL per ogni click
- Limitazione della pressione



Intraligamentalia™

Garanzia: 2 Anni
Materiale: acciaio inossidabile
Confezione: 1 Pezzo

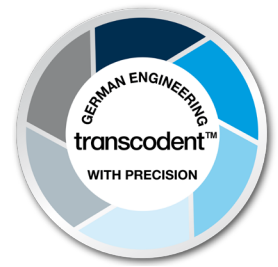

transcodent™ Aghi di alta qualità



Acciaio trattato termicamente
Facilmente piegabili

- Cannula trattata termicamente
- Facilmente piegabili
- Per l'aspirazione in aree di difficile accesso, ad esempio durante procedure endodontiche o chirurgiche

* Cannula TW (Thin Wall, parete sottile)




Apertura laterale apicale



Marcature laser

- Apertura laterale apicale
- Per aspirazione in prossimità dell'apice
- 4 marcature laser

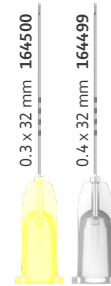

Aghi per aspirazione

Luer Lock

Misure: G 14 / 2.1mm, G 16 / 1.6mm, G 18 / 1.2 mm, G 20 / 0.9mm
Colori: verde, bianco, rosa, giallo
Confezione: 100 Pezzi

Aghi per aspirazione endodontica

Luer Lock

Misure: G 27 / 0.4mm, G 30 / 0.3mm
Colori: giallo, grigio
Confezione: 100 Pezzi

- Irrigazione dell'intera lunghezza del canale radicolare
- Base Luer Lock, confezionati singolarmente
- Thin Wall: ago con parete particolarmente sottile per una maggiore flessibilità
- Sterilizzati in ossido di etilene



Doppia apertura laterale




Singola apertura laterale

Doppia apertura laterale

- L'originale: aghi per irrigazione con 2 aperture laterali
- Punta chiusa e arrotondata, riduce la possibilità di penetrare oltre l'apice



long 32 mm Lunghezza 32 mm

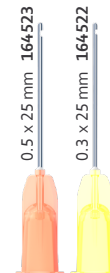

Singola apertura laterale

- Per l'irrigazione delicata ma efficace del canale radicolare. L'apertura laterale e l'estremità arrotondata prevengono la perforazione dell'apice

Aghi per irrigazione endodontica

Luer Lock Parete sottile


Misure: G 23 / 0.6 mm, G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm, G 31 / 0.28 mm
Colori: blu, rosso, grigio, giallo, rosa
Confezione: 25 Pezzi

Luer Lock Parete sottile

Misure: G 25 / 0.5mm / G 30 / 0.3mm
Colori: rosso, gelb
Confezione: 25 Pezzi

Luer Lock

- Irrigazione di tasche parodontali e canale radicolare
- Adatti per siringhe Luer e Luer Lock
- Adatti per siringhe monouso
- Sterilizzati in ossido di etilene

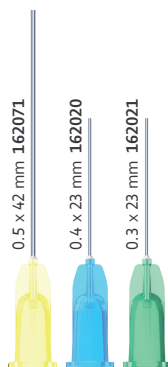


- Punta arrotondata: per l'applicazione in tasche parodontali
- Sterilizzati in ossido di etilene

Tubofiale

- Con base in plastica
- Adatti per le normali siringhe per tubofiale
- Facilmente piegabili

Luer Lock

- Adatti per siringhe Luer e Luer Lock

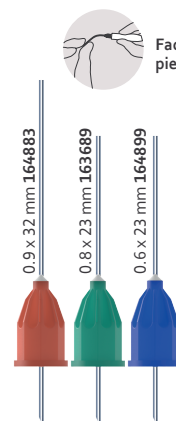

Facilmente piegabili



Aghi per irrigazione

Luer / Luer Lock

Misure: G 25 / 0.5 mm, G 27 / 0.4 mm, G 30 / 0.3 mm
Colori: giallo, blu, verde
Confezione: 100 Pezzi

Aghi erogatori per pasta

Tubofiale

Misure: G 20 / 0.9 mm, G 21 / 0.8 mm, G 23 / 0.6 mm
Colori: rosso, verde, blu
Confezione: 100 Pezzi

Luer / Luer Lock

Misure: G 20 / 0.9 mm, G 23 / 0.6 mm, G 25 / 0.5 mm
Colori: rosso, giallo, blu
Confezione: 100 Pezzi

Codifica dell'articolo: esempio: z. B. (0.5 x 42 mm 162071)
(Diametro x lunghezza in mm n. codice articolo precedente)



medmix Deutschland GmbH | Zum Kesselort 53 | 24149 Kiel | Germany www.medmix.swiss

Avviso legale: la presente brochure è una presentazione generale. Le informazioni contenute in questa pubblicazione sono ritenute accurate e affidabili, ma non sono da interpretare come garanzia implicita di prestazioni. Decliniamo ogni responsabilità o richiesta di indennizzo per gli effetti risultanti dalla sua applicazione. Vi preghiamo di contattarci per una descrizione delle garanzie offerte con i nostri prodotti. Le istruzioni per l'uso e per la sicurezza vengono fornite separatamente. Tutte le informazioni qui contenute sono soggette a variazione senza preavviso. medmix è un marchio registrato proprietà di medmix AG, e transcodent, Painless Steel, Luminject e Intraligamentalia sono marchi registrati proprietà di medmix Switzerland AG. Copyright © 2023 medmix Switzerland AG. Tutti i diritti riservati.



DENTAL